



ケルダール蒸留装置
オートサンプラーご購入キャンペーン

実施期間
2024年6月末まで

〈期間限定〉スペシャルセット

オートサンプラーシステム+ 分解器+メンテナンスキット

が、オートサンプラーシステム(K-375/376、K-375/377)
の装置価格だけでご購入いただける
おトクなキャンペーン!

【セット内容】

- オートサンプラーシステム



オートサンプラー
システム
動画



※写真はオートサンプラー
システムK-375/K-376



- ケルダール分解器K-449
(20本掛け分解器)



- K-375用メンテナンスキット
- サンプラー用メンテナンスキット

ケルダールシステム
動画



【ご注文番号】

セット名	品番
K-375/376(20本サンプラー)	11375171023
K-375/377(40本サンプラー)	11375172023

オートサンプラーご購入キャンペーンについて

●K370/371をお使いのお客様へ

ビュッヒでは、製造を中止してから機械部品は**10年間入手できることを保証**しています。**K-370/371は2012年に販売を終了**しているため、今後、供給が困難になる部品が出てくる可能性があります。

そこで、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めた「オートサンプラー更新キャンペーン」を実施いたします。ぜひ、この機会に更新のご検討をお願いいたします。

●他社製のオートサンプラーシステムをご使用中の方へ

日々の分析でお困りごとはございませんか？

ビュッヒの製品は、オリジナルのサンプル移送構造を採用。

トラブルが少なく、お客様でのメンテナンスもしやすい構造となっています。

革新的なオートサンプラーシステム K-375/K-376/K-377の特長と利点

1. 効率よく測定

- 20検体または40検体分の自動測定
- 独立した2つのラックトレイを用い、連続バッチ作業可能 (K-377)
- 分解器のラックと共通。分解器からオートサンプラーへ分解したサンプルをそのままセット

2. ビュッヒオリジナルのサンプル移送構造

- コンパクトなモジュールシステム
- 蒸留中も経路を蒸気が流れているので、クロスコンタミの心配なし


3. 高い柔軟性

- 「緊急ラック」により割り込み測定可能
- 蒸留器単体とオートサンプラーでの蒸留の切り替えがいつでも可能

4. 扱いやすく安全

- 各種安全センサー
- 試料管は蒸気で洗われるので、薬品に触れずに蒸留終了
- ガラス試料管を移動しないので、確実に清潔な蒸留が可能

ビュッヒオリジナルのサンプル移送構造

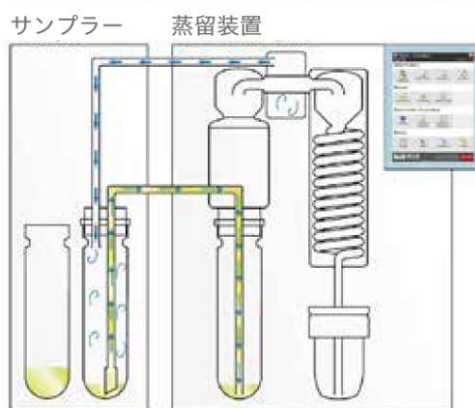

サンプルの移動後、蒸留を開始します。
蒸留中も常に、水蒸気はK-376/377を経由してK-375の蒸留サンプル試験管に送られていますので、分解サンプル試験管内と移送チューブ内にサンプルが残留することはありません。

柴田科学株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310 マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

お問い合わせ
nihon@buchi.com | www.buchi.com/ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2023年3月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

製品別の
電子カタログ
はこちらへ

