

FTIR・ラマン プレミアムキャンペーンガイド 2025

Nicolet Summit X FTIR + Everest (ダイヤモンドATRパッケージ)



Thermo Scientific™ Nicolet™ Summit™ X FTIR



Thermo Scientific™ Everest™ ダイヤモンド ATR



Thermo Scientific™ OMNIC™ Paradigm ソフトウェア

キャンペーン価格

¥3,000,000

ライブラリー数：24,521スペクトル含む

Nicolet Summit X FTIRの用途

- 製品中の異物分析（食品・材料など）
- 医薬品の薬局方試験（JP/USP/EP/CP）
- 数mmのマイクロプラスチック分析

Nicolet Apex FTIR + Smart iTX (ダイヤモンドATRパッケージ)



Thermo Scientific™ Nicolet™ Apex™ FTIR



Thermo Scientific™ Smart™ iTX ダイヤモンド ATR



OMNIC Paradigm ソフトウェア

キャンペーン価格

¥4,250,000

ライブラリー数：28,681スペクトル含む


Nicolet Apex FTIRの用途

- 不良品や劣化品の解析
- 製品の品質チェック（検量線での定量）
- ガスや熱硬化性樹脂などの反応追跡

Nicolet iS50 FTIR + ビルトインATR



Thermo Scientific™ Nicolet™ iS50 FTIR

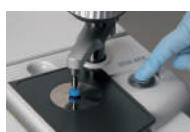

ビルトインATRオプション

キャンペーン価格（ビルトインATRあり）

¥6,400,000

キャンペーン価格（ビルトインATRなし）

¥4,580,000

Nicolet iS50 FTIRの用途

- ビルトインATRによる成分分析
- MCT検出器追加により加熱拡散反射測定や低濃度ガス測定に対応
- ラピッドスキャンによるUV硬化測定にアップグレード可能
- 近赤外～遠赤外測定へ拡張可能
- 偏光測定・FT-Ramanなど豊富なオプションに対応

キャンペーン期間

2025年4月1日（火）～ 2025年9月26日（金）弊社受注分まで

Nicolet iN10顕微FTIR + Tip-ATR (顕微ATRパッケージ)



Thermo Scientific™ Nicolet™
iN10顕微FTIR



顕微用Tip- (Ge)
ATRアクセサリ



Thermo Scientific™
OMNIC™ Spectraスペク
トルサーチソフトウェア

キャンペーン価格

¥11,600,000

ライブラリー数：21,693スペクトル含む

Nicolet iN10顕微FTIRの用途

- 室温型検出器による低波数の測定
- 基盤・錠剤・ポリマーなどの成分分布
- ケミカルイメージによるポリマーの分布
- 可視赤外同時観察によるスクリーニング


Nicolet iN10 MXイメージング顕微FTIR + Tip-ATR (顕微ATRパッケージ)



Thermo Scientific™ Nicolet™
iN10 MXイメージング顕微FTIR



顕微用Tip- (Ge)
ATRアクセサリ

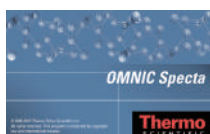

OMNIC Specta
スペクトルサーチソフト
ウェア

キャンペーン価格

¥14,980,000

ライブラリー数：21,693スペクトル含む

Nicolet iN10 MXイメージング顕微FTIRの用途

- ウルトラファーストによる高速マッピング
- 最大3台の検出器が装備可能
- 多変量解析によるラミネートフィルム分析
- 高速マッピングでのマイクロプラスチック分析

Antaris II近赤外アナライザー (透過測定パッケージ)



Thermo Scientific™ Antaris™ II
近赤外アナライザー



液体透過セル



Thermo Scientific™
TQ Analyst™ソフトウェア

キャンペーン価格

¥6,800,000

Antaris II近赤外アナライザーの用途

- 原材料の受入検査
- タブレット (API) 含有量の確認
- 乾燥プロセスのモニタリング
- 食品中の各成分の定量分析
- ポリウレタン原料ポリオール

豊富な測定モジュール

Antaris II 近赤外アナライザーには透過測定モジュールを含むさまざまな測定モジュールオプションがあり、サンプルに合わせて最適な測定手法でより良い結果を取得できます。



積分球 バイアル瓶



ファイバーモジュール



タブレットホルダー



オートサンプラー

キャンペーン期間

2025年4月1日(火)～ 2025年9月26日(金)弊社受注分まで

DXR3顕微ラマン + 532 nmレーザーセット (顕微ラマンパッケージ)



Thermo Scientific™ DXR™3
顕微ラマン



532 nmレーザー、フィルター、グレーティングセット

キャンペーン価格

¥15,700,000

ライブラリー数: 3,264スペクトル含む

DXR3顕微ラマンの用途

- 電池材料の評価 (正極・負極・電解質)
- フィルムの分子配向分析 (偏光ラマン)
- 接着剤硬化度の深さ分析

DXR3xiイメージング顕微ラマン+ 532 nmレーザーセット (イメージングラマンパッケージ)



Thermo Scientific™ DXR™ 3xi
イメージング顕微ラマン



532 nmレーザー、フィルター、グレーティングセット

キャンペーン価格

¥26,500,000

ライブラリー数: 3,264スペクトル含む

DXR3xiイメージング顕微ラマンの用途

- 粒子解析
- 偏光イメージングによる配向性評価
- グラフェンの分析
- 生体組織研究
- リチウムイオン電池電極の分析

DXR3 Flexラマン分光装置 + ライブラリー



Thermo Scientific™
DXR™3 Flexラマン
分光装置



532 nmレーザー、フィルター、
グレーティングセット



OMNIC Spectraスペクトル
サーチソフトウェア

キャンペーン価格

¥10,900,000





ライブラリー数: 3,264スペクトル含む

DXR3 Flexラマン分光装置の用途

- 大型のサンプルにも対応
- マクロ測定やファイバースコープ測定にも対応
- XPSやレオメーターとの複合分析も可能

大型サンプルの測定

DXR3 Flexラマン分光装置は、顕微ラマン装置ではサンプル室に入らない絵画や鉱物などの1 m以上の大型サンプルも測定できます。さらに、右図写真のように絵画全体にわたり、対物レンズを用いてポイント測定を行い、絵画原料の定性分析も可能です。

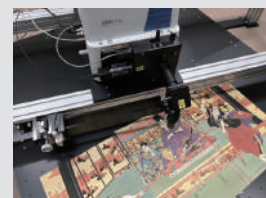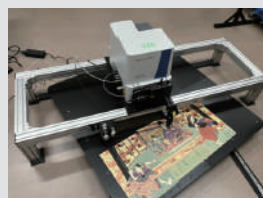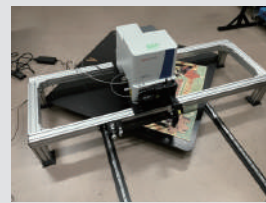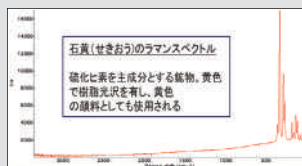

東京文化財研究所 保存科学研究センターさまご協力

キャンペーン期間

2025年4月1日(火)～ 2025年9月26日(金)弊社受注分まで

MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザー + 解析用ソフトウェア

キャンペーン価格

¥12,600,000

MarqMetrix AIOプロセスラマンアナライザーの用途

- 各種プローブの選択によりさまざまなアプリケーションに対応
- バイオ医薬品の風呂セス分析技術 (PAT)
- オイル・ガス製造を含むさまざまな化学反応モニタリング



Thermo Scientific™ MarqMetrix™
All-In-One (AIO) プロセスラマンアナライザー



Thermo Scientific™
OMNIC™ソフトウェア

特長

- サンプル調製なしで分析を行い、ラマンスペクトル結果をリアルタイムで提供
- ラマン分光の専門知識の有無にかかわらず簡単に機器設定と操作が可能
- 貴重なサンプルを非破壊で測定
- サンプルの汚染を最小限に抑える非侵襲性 (ガラス越しの測定など)
- 設置面積が小さく、導入が容易

主な仕様

冷気波長: 785 nm

レーザーパワー: 100~450 mW

検出器: 温度制御CCD (2段TEC)

スペクトル範囲: 100~3,250 cm^{-1}

波数分解能: 5 cm^{-1}

サイズ (W × D × H) : 25 × 25 × 7.7 cm

豊富なアプリケーション (ラボ~製造プラント)

- 医薬品・ライフサイエンス (バイオプロダクション)
- 細胞培養プロセス、溶解度、注射製剤、結晶多形、タンパク質、合成プロセスモニタリングなど
- オイル・ガス生産: 触媒反応、水素、 CO_2 、アンモニア、不純物ガスの測定
- 工業的発酵: 培養肉生産、発酵製品
- 化学: ポリマー重合、有機合成
- 電池リサイクルプロセスのモニタリング
- リチウム (Li)、マンガン (Mn)、コバルト (Co) 化合物などの湿式精錬をリアルタイムで制御



キャンペーン期間

2025年4月1日(火) ~ 2025年9月26日(金) 弊社受注分まで

研究用にも使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2025 年 4 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc FTIR521-A25040B

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific