



池田理化オリジナルキャンペーン

キャンペーン期間


年度末大放出！
日頃のご愛顧に感謝を込めて
売れ筋顕微鏡を特別価格でご提供いたします。

2025年2月1日
～2025年3月20日
受注分まで

クリアな観察とコンパクトで快適な操作性を実現する細胞チェッカー

培養顕微鏡CKX53-21PH 位相差観察エントリーセット

- 4～40×まで位相差素子を変えることなくシームレスな位相差観察が可能(*)
- 長寿命LED光源によるクリアで広い視野の照明

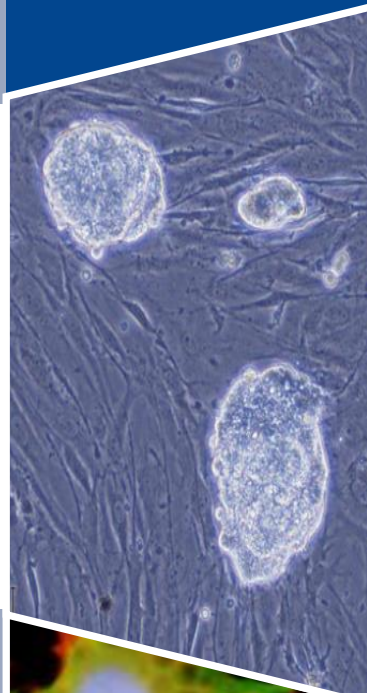

セット	通常価格	キャンペーン価格
CKX53-21PH	¥533,000 (税抜)	¥450,000 (税抜)


構成：顕微鏡本体、プリセンター式位相差スライダー、位相差用対物レンズ（iPC）4×、10×、20×

上記価格に設置調整費は含まれておりません

明るい室内でも鮮明で高いコントラストの蛍光観察を実現

培養顕微鏡CKX53-22FL/PH 蛍光・位相差観察セット

- アンブラシールド（外乱光遮光板）を用いることで、室内光を効果的に遮断し、明るい室内でもバックグラウンドノイズが低いクリアなB・G励起の蛍光観察が可能
- 各種細胞培養容器での操作が容易なメカニカルステージを標準装備しており、96ウェルマイクロプレート使用時には、ステージの目盛によりウェル位置がひと目で判明

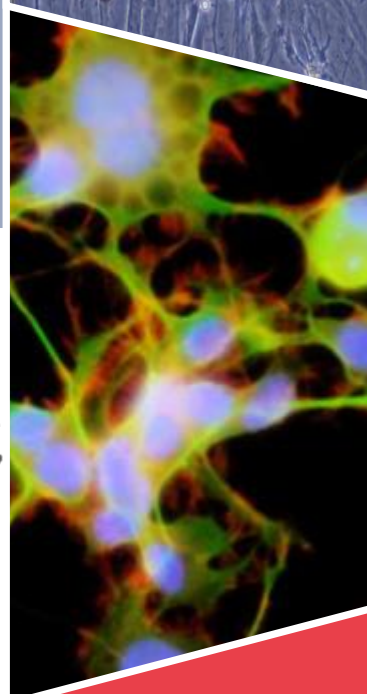

セット	通常価格	キャンペーン価格
CKX53-22FL/PH	¥1,636,000 (税抜)	¥1,300,000 (税抜)

構成：顕微鏡本体、プリセンター式位相差スライダー、位相差用対物レンズ（iPC）4×、10×、20×、40×、メカニカルステージ、補助ステージ、ユニバーサルホルダー、B/G蛍光フィルター、水銀ランプハウス、アンブラシールド

上記価格に設置調整費は含まれておりません


培養作業の効率化をサポートする高い光学性能



1 倍率変更時の手間を省き、スムーズな観察を実現します。

iPCシステム (integrated Phase Contrastsystem) では、同一のリングスリットで4Xから40Xまでの位相差観察に対応し、対物の切り替えの際にリングスリットを変更する必要がありません

シンプルで効率的な機構により、インキュベーターから取り出した培養細胞を素早く観察することが可能です。

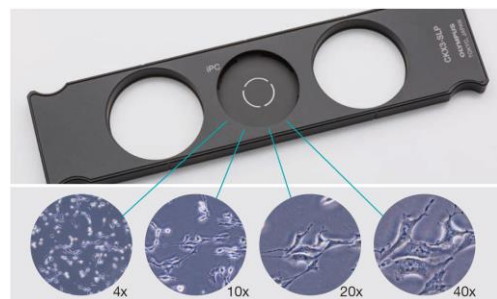

対物レンズ4〜40×までスライダーの切替操作が不要

2 様々な培養容器での安定した細胞チェックを実現

メカニカルステージに搭載されているホルダーアームは跳ね上げが可能です。跳ね上げる事で観察用途や培養容器の大きさに応じた柔軟な操作が可能です。

マルチレイヤー培養フラスコの最下段の細胞だけでなく、下から2段目までの細胞に焦点を合わせることができ、広い範囲の観察が可能です。



各種容器を保持でき、必要時に退避できるリトラクティブホルダー



オプションのサブステージを用いれば、より安定した状態での観察が可能

3 高コントラストな蛍光観察

アンブラシールド (外乱光遮光板) を用いることで、室内光を効果的に遮断し、明るい室内でもバックグラウンドノイズが低いクリアな蛍光観察が可能になります。

水銀ランプ以外にもYODN社の蛍光顕微鏡用LED光源 Hyper E630を取り付けることができます。高速点灯/消灯が可能なLED光源により、長寿命かつ応答性が速くすぐに観察を開始することができます。



CKX53-22FL/PHに標準装備



Hyper E630
DAPI、GFP/FITC、
Mcherry/Texas Red
など、さまざまな
蛍光色素に対応

お問合せ先



株式会社 池田理化

<https://www.ikedarika.co.jp>

本社
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-6 神田KSビル
TEL : 03-5256-1811 FAX : 03-5256-1818

□八王子支店 TEL:042-642-0570
□小金井支店 TEL:0422-39-5441
□鶴見支店 TEL:045-501-5881
□横浜支店 TEL:045-983-0491
□藤沢支店 TEL:0466-54-0300
□平塚支店 TEL:0463-37-4711
□三島支店 TEL:055-975-0975
□藤枝支店 TEL:054-644-5551
□名古屋支店 TEL:052-249-8350

□大阪支店 TEL:06-6136-1255
□岩国支店 TEL:0827-21-6701
□千葉支店 TEL:043-290-4055
□つくば支店 TEL:029-836-6611
□埼玉支店 TEL:049-245-7831
□宇都宮支店 TEL:028-610-3722
□仙台支店 TEL:028-610-3722
□札幌支店 TEL:011-208-2822