


チューブの無菌接合

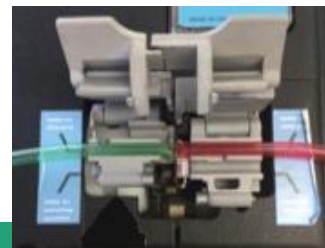

今
だけ

テルモBCT社製

無菌接合装置SCD II B

期間限定キャンペーン

¥2,662,000-

➡ **¥2,130,000-** (税別)


2025/11~2026/02末ご注文分まで

無菌接合装置とチューブコネクタの比較



無菌接合装置

- 事前のアッセンブリー不要。
- 初期投資が必要であるが、接続のランニングコストを軽減。
- 安定したチューブ接合
- 同径 (1/4インチ) ・同材 (TPE/PVC) のみのチューブ接合

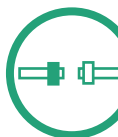

チューブコネクタ

- 事前にチューブとコネクタのアッセンブリーが必要。
- デバイスの購入は不要だが、接続のランニングがコストがかかる。
- 不完全な接続のリスクあり。
- 異径・異材のチューブ接続も可能

チューブ接合を30秒以内で行います。

約260℃に加熱したウェハーでのチューブの切断と接合により、無菌性と閉鎖系を維持します
空一液入りチューブ間の接合、および空チューブ同士の接合の両方に使用できます。




迅速ー約30秒で完了する無菌接合により、製造時間を短縮




可搬性ー軽量でコンパクトな装置は必要な場所に簡単に移動可能



コスト効率ーお求めやすい装置とウェハーにより、低い製造コストをサポート

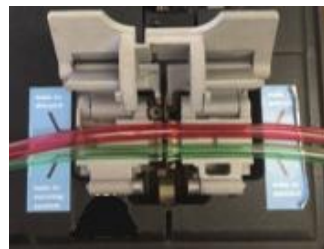

チューブの無菌接合

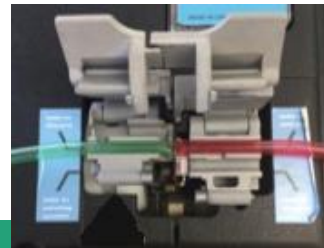

今
だけ

テルモBCT社製

無菌接合装置SCD II B

期間限定キャンペーン

¥2,662,000-

➡ **¥2,130,000-** (税別)

2025/11~2026/02末ご注文分まで

無菌性と閉鎖系を維持したまま
30秒以内でチューブを接合

※同径(1/4インチ)・同材(TPE/PVC)のみ

迅速 — 約 30 秒で完了する無菌
接合により、製造時間を短縮

可搬性 — 軽量でコンパクトな装置
は必要な場所に簡単に移動可能

コスト効率 — お求めやすい装置
とウェハーにより、低い製造コスト
をサポート



株式会社 池田理化